

MASAAO-kun

Multi Adaptation,
Super Active Action &
Tottemo Omoroi
Kinetic Universal Net



結束バンドでの固定

製作協力者
(まさとくん)

重症心身障害者の運動誘導は難しい。

力

が必要


時間

が必要

支持
面

多様な


が必要

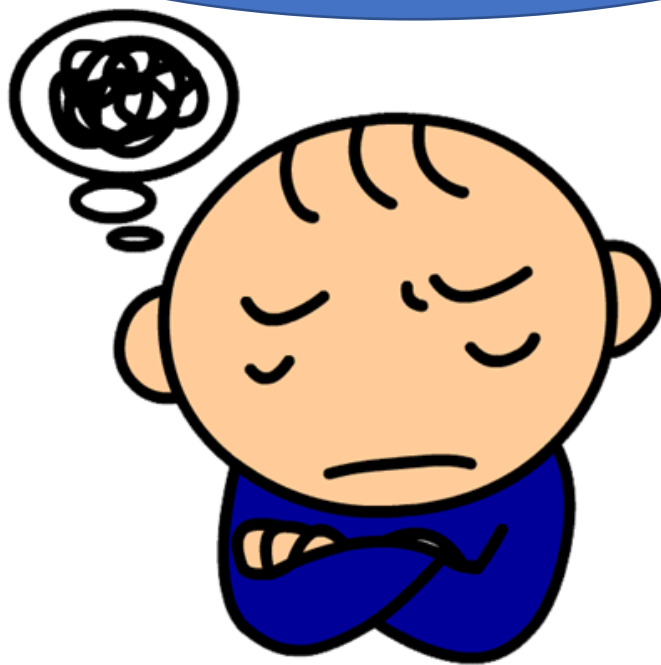


The SPIDER のような自由度があれば・・・




Child Resarch Netより

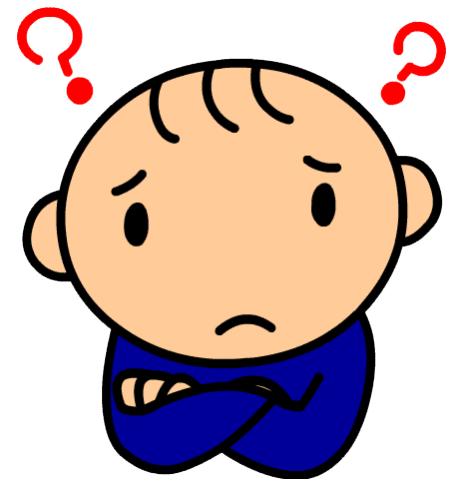

MASAATO-kun (ベルデ通称) を考えた


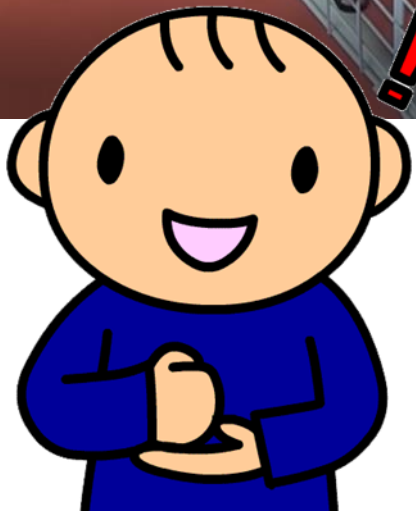


MASAATO-kun フレーム 作製方法/材料

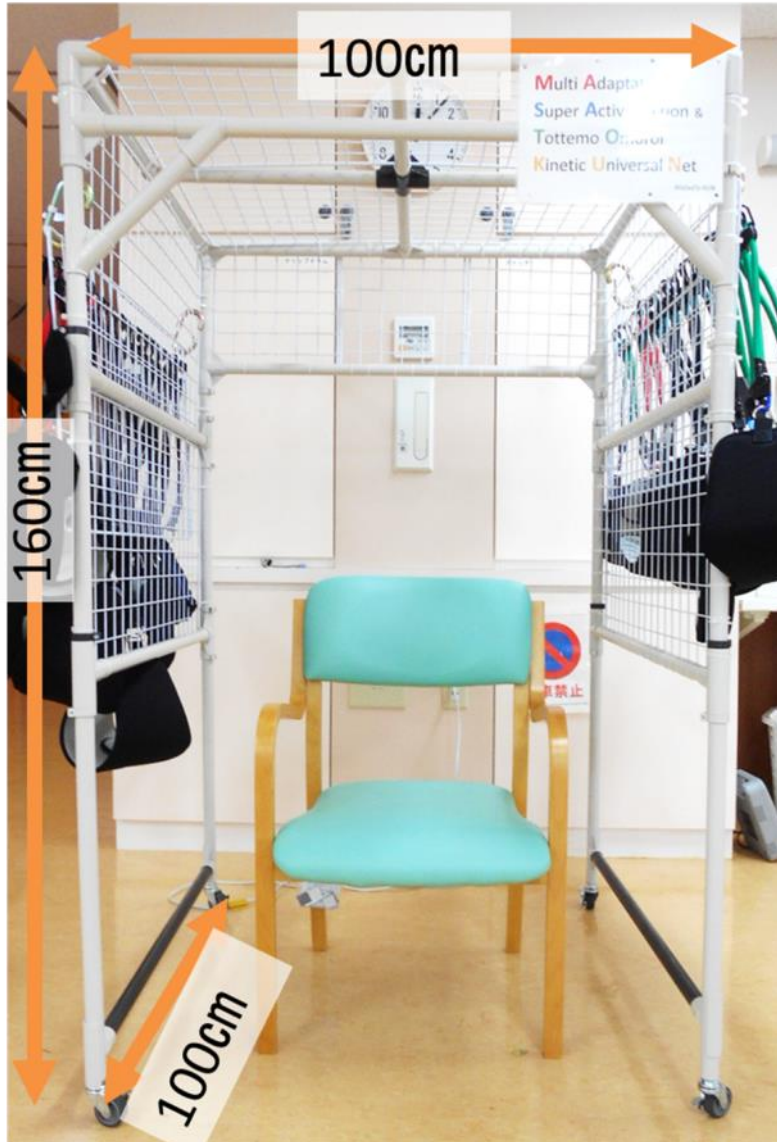

- イレクターパイプ
(矢崎化工業株式会社)
- スペーシア
(スペーシア株式会社)
- スチールネット
90×45 ; 約2000円 ; 6枚
30×30 ; 約500円 ; 3枚
- フレームにスチールネットを結束バンドで固定

MSAATO-kun.Jr ベッドサイドで使用可能

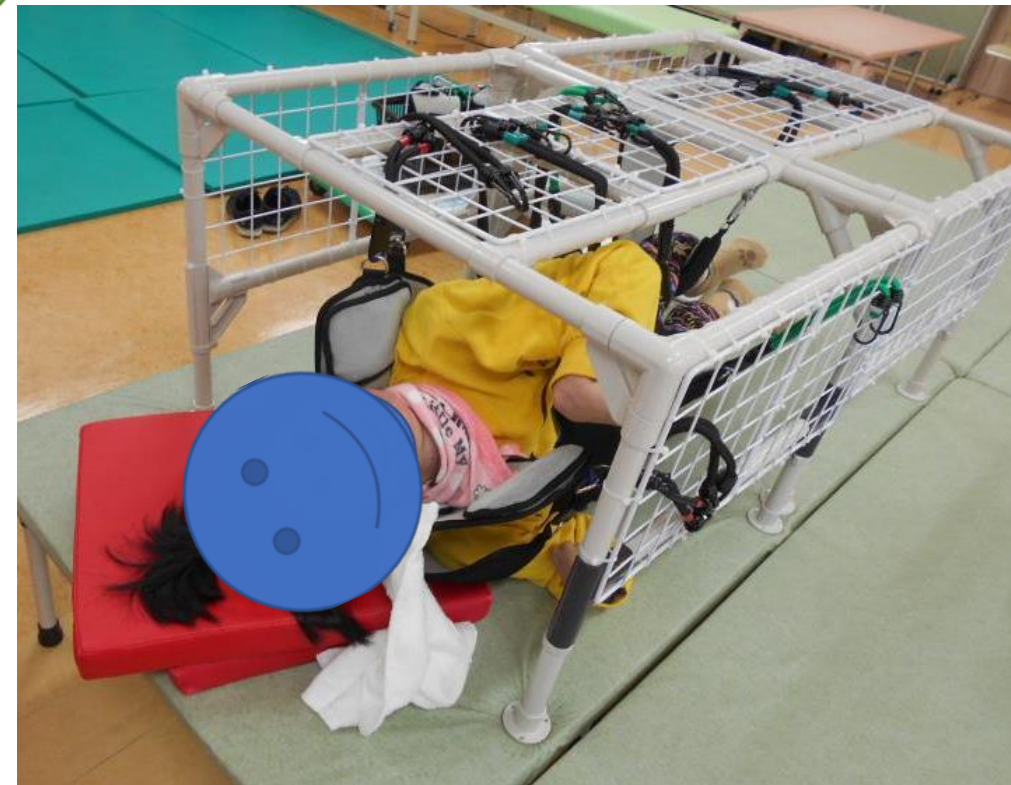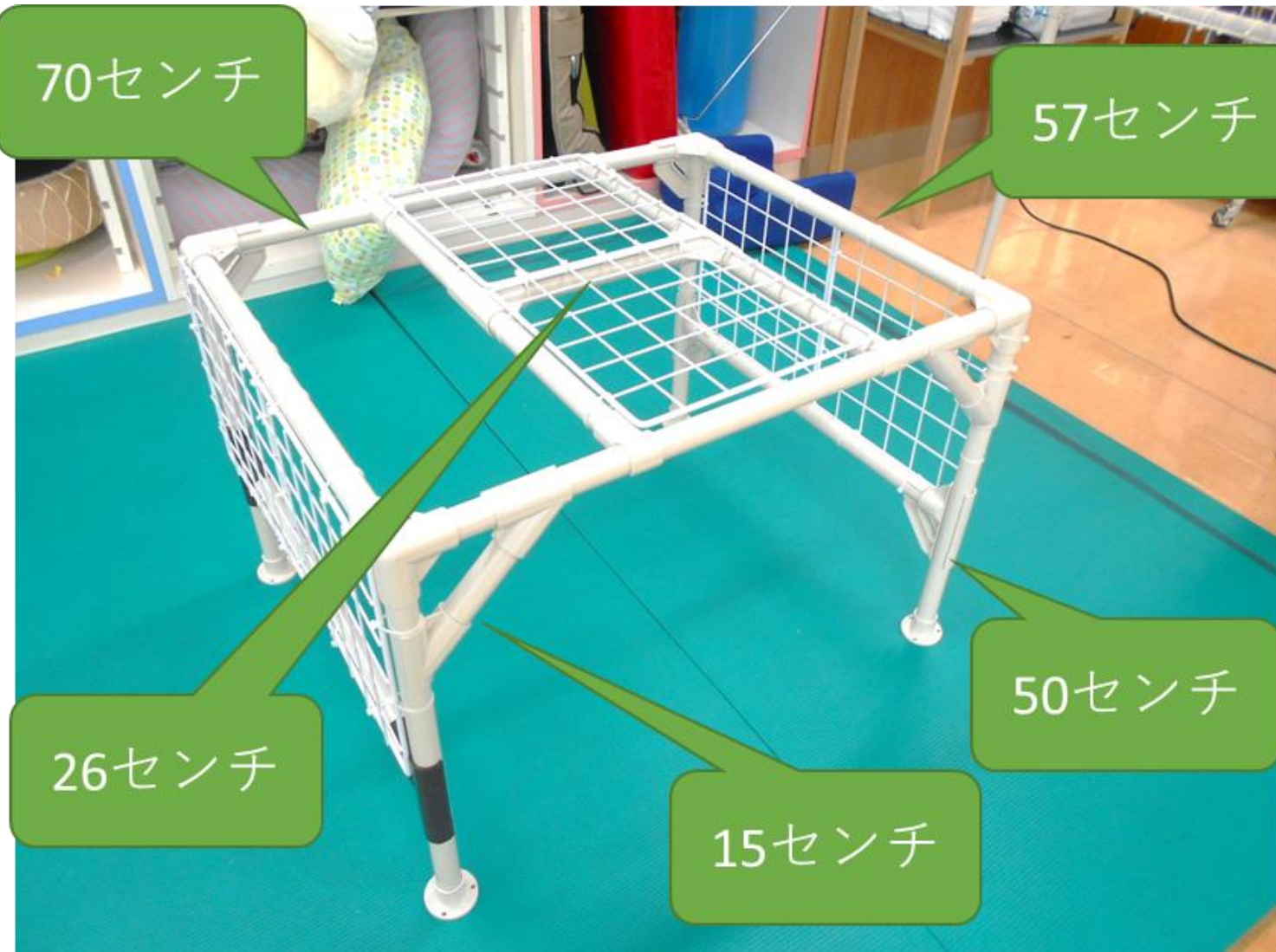

上部のネットは取り外し可能


MSAATO-kun.mini

分解して持ち運びが可能



上部のネットは取り外し可能

MASAATO-kun スリング 作製方法/材料

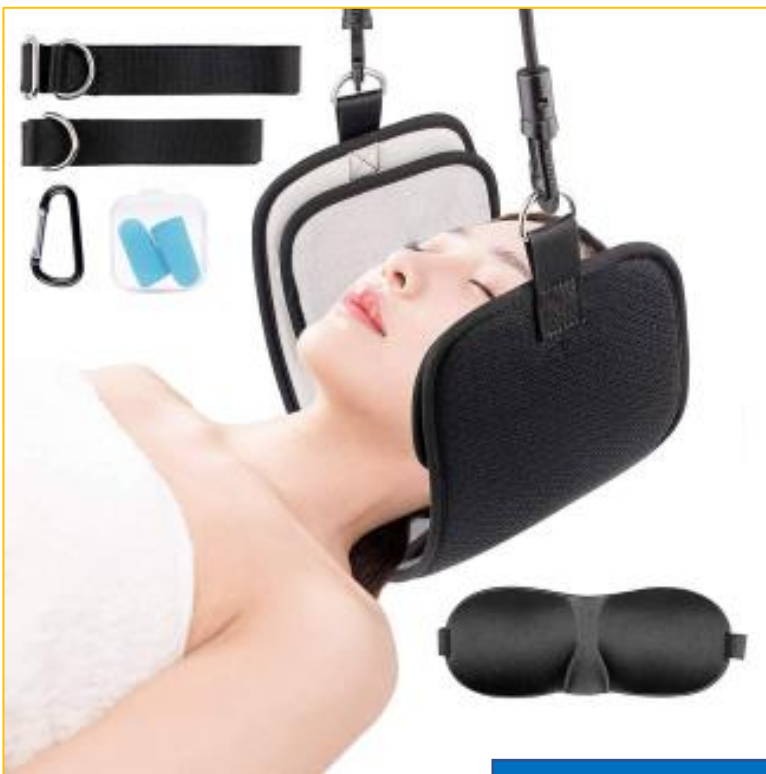

ネックハンモック
を改造



- ・ バンジーゴムを結束バンドでカラピナに固定。
- ・ 熱収縮チューブで金属部分を被膜。

MASAATO-kun スリング 作製方法/材料

- ネックハンモックを利用 1000円～2000円 (amazon)
 - バンジーゴム (10mm程度)
90/70/50/30cm : 200～300円 (モノタロウ)
 - カラピナ
 - 熱収縮チューブ (25mm程度)
- ネックハンモック以外はホームセンター等で購入可能

MASAATO-kunの

支持面は



国宝「千手観音菩薩坐像」奈良時代・8世紀 大坂・豊国寺蔵 展示期間：2月14日～3月11日

OTの 手と力

MASATO-kunの

支持面は




OTの
抱っこ

考察

弾力性 柔軟性 密着性 運動性 変化性 支持力のある支持面が

抱かれているような
心地よさ
動きやすさ
揺すり
を提供し

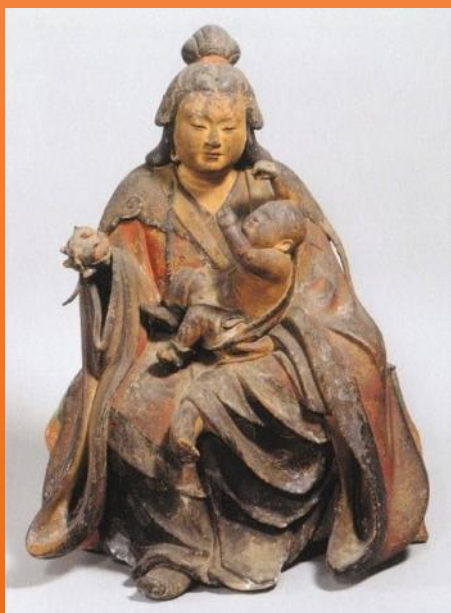

鬼子母神

OTの
足りない手の数、
持ち上げきれない力、
支え続けられない力、
を補い

多様な可動性,多量の運動性、
経験しにくい運動感覚学習
につながった

千手観音



国宝「千手観音菩薩坐像」奈良時代・8世紀 大仏・東大寺蔵 撮影期間：2月14日～3月11日



MASAATO-kun
つかってね。